

7124 ハイパーex ウォーム

取扱説明書

義肢装具士の方へ

本製品を安全にお取扱いいただくために、使用前に本取扱説明書をお読みください。また、必要な際に参照できるようお手元に保管してください。

装着者の方へ、装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などをご案内ください。

使用目的:

肘関節の過伸展を抑制します。

適応・用途:

肘関節の過剰動揺性など

素材:

本体:ネオプレン、ナイロン / ヒンジステー: 鉄

使用上の注意

- ◆ 適応方法等のお問い合わせやご相談は、医師または義肢装具士にご連絡ください。
- ◆ 本製品は不燃性ではありません。本体を火気に近づけたり、120℃を越える場所に放置したりしないでください。
- ◆ 本体の調整は、医師または義肢装具士のみが行えます。
- ◆ 本製品の機能変更、または機能が損なわれる加工は行わないでください。製品は本来の目的及び、適用範囲にのみご使用ください。
- ◆ ネオプレン素材を使用している製品に関して、4時間を超える連続使用は避けてください。
その他の素材を用いている製品の使用に関して、医師または義肢装具士からの指示などが無い限り、8時間を超える連続使用は避けてください。
- ◆ 使用されている素材に対しアレルギーがある方は、製品を使用する前に医師にご相談ください。本製品に使用されている素材の内容は、上記に記載されています。
- ◆ 本製品を廃棄する際には、各自治体の廃棄区分に従ってください。


装着方法

初めて装着する際は、必ず医師・義肢装具士のもと行ってください。

- 1) 装着前、必要に応じて肘ヒンジステーを部位に合わせ調整してください。
- 2) すべての面ファスナーを外し、腕を本体に通して肘ヒンジ部分を持ちながら、肘まで引き上げます。
- 3) 本体の上腕部と、前腕部の面ファスナーを留めてください。
- 4) 軽く肘を曲げ、交差しているベルトストラップの面ファスナーを1本ずつ留めます。全体を強く締めすぎないように注意し、正しく装着されていることを確認してください。

お手入れの方法

- ◆ すべての面ファスナーを閉じてください。本体より可能な限りステーは取り外してください。
- ◆ 洗濯の際には 40℃ 以下の水と中性洗剤を使用し、手洗い、陰干しをしてください。
- ◆ 陰干しする際、製品のシワを軽く伸ばしてください。
- ◆ 塩素系漂白剤、洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロン、ドライクリーニングなどの使用は行わないでください。

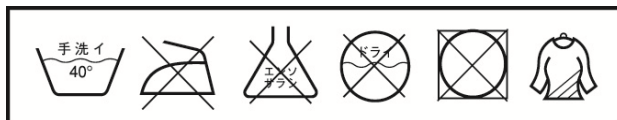

お問い合わせ窓口:

輸入元: オットーボック・ジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F

201301-0BJ

O-IFU-7124